

사용 지침

IOPI® 연결 튜브

REF 5-0001

IOPI® 연결 튜브는 IOPI® 시스템과만 함께 사용하도록 승인된 구성 요소입니다. 이 구성 요소를 사용하기 전에 IOPI® 시스템과 함께 제공된 IOPI® 사용 설명서를 잘 읽으시기 바랍니다.

사용 용도

IOPI® 연결 튜브는 IOPI® Pro(모델 3.1)과 함께 사용해야 합니다.

IOPI® Pro(모델 3.1)는 의료서비스 전문가들이 연하곤란, 구음장애 및 폐쇄수면무호흡을 포함한 구강운동장애 환자의 혀와 입술의 근력과 지구력을 측정하고 평가하고 향상시키는 데 사용됩니다.

IOPI® Pro는 의료서비스 전문가가 임상용으로 사용해야 합니다.

주의사항

- 주의: 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 연결 튜브의 작은 부품이 어린이에게 삼킴 또는 구토 위험을 유발할 수 있습니다.
- 주의: 각 사용 후 연결 튜브를 세척하십시오. 교차 오염을 방지하기 위해서 필요합니다.
- 주의: 체액과 접촉하는 경우 연결 튜브를 재사용하지 마십시오. 그럴 경우 환자가 세균 또는 바이러스에 노출되어 질병에 걸릴 수 있습니다.

관리 지침

세척

- 연결 튜브의 바깥쪽은 살균 천으로 닦을 수 있습니다.
- 연결 튜브 안에 물이나 액체가 들어가지 않게 하십시오. 압력 수치가 부정확해질 수 있습니다.

보관

사용 후에는 물기 없이 깨끗한 밀봉 용기에 넣어 직사광선이 비치지 않는 곳에 보관하십시오.


폐기

플라스틱 튜브가 찢어지거나, 금속 핀이 튜브와 분리되거나, 노화 또는 성능 저하의 기타 징후가 보일 경우, 연결 튜브를 폐기하십시오.

어린이의 손이 닿지 않는 곳에 의료 폐기물로 폐기하십시오.


사용 방법

- 연결 튜브의 비금속 튜브 단부를 IOPI® 장치의 압력 유입 포트[④]에 연결합니다.
- 연결 튜브의 금속 단부를 혀 밸브 튜브에 연결합니다.
- 혀 밸브 튜브로부터 연결 튜브를 분리하려면 **두꺼운 튜브를 잡고 혀 밸브 튜브를 비틀고 구부리면서 조심스럽게 떼며 분리시켜서** 공기 밀폐부를 뜯어냅니다.

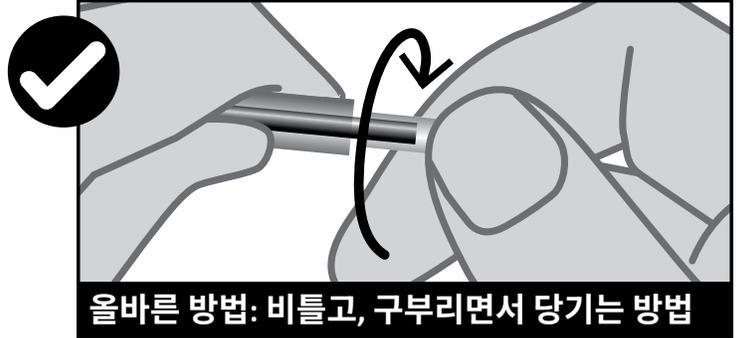


올바른 방법: 비틀고, 구부리면서 당기는 방법

- 한 손으로 연결 튜브의 두꺼운 부분을 잡습니다.
- 다른 한 손으로 혀 밸브 튜브를 비틀면서 부드럽게 구부리고 당겨 분리합니다.

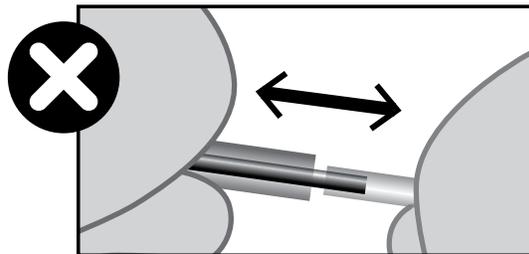

곧바로 당기며 떼어내지 마십시오

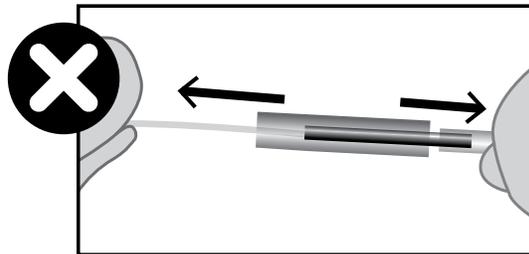

가는 튜브를 당기지 마십시오

- 연결 튜브를 압력 유입 포트[④]와 분리하려면 두꺼운 튜브를 잡고 조심스럽게 장치에서 연결 튜브를 당겨 빼냅니다.

재주문 정보

재주문 PN 5-0001

IOPI® 아이콘

기호	명칭	설명	참고자료 ¹
	카탈로그 번호	제조업체의 참조 번호를 나타내어 의료기기를 식별할 수 있게 합니다	ISO 15223-1, Clause 5.1.6
	로트번호	제조업체의 로트번호를 나타내어 로트를 식별할 수 있게 합니다	ISO 15223-1, Clause 5.1.5
	만료일	의료 기기를 더 이상 사용해서는 안 되는 날짜를 나타냅니다	ISO 15223-1, Clause 5.1.4
	제조업체	의료기기 제조업체를 나타냅니다	ISO 15223-1, Clause 5.1.1
	일광 차단 보관	의료 기기를 광원으로부터 보호해야 함을 나타냅니다	ISO 15223-1, Clause 5.3.2
	사용 설명서 참조	사용 설명서를 읽어야 함을 나타냅니다	ISO 7010-M002
	영국 적합성 평가	유럽 기술 인증을 받았음을 의미합니다	Regulation (EC) No 765/2008 Annex 2

1. 사용된 기준: BS EN ISO 15223-1:2021, 의료 기기 - 제조업체가 공급하는 정보와 함께 사용해야 하는 기호. ISO 7010:2019, 그래픽 기호 - 안전 색상 및 안전 표지 - 등록된 안전 표지.

기술 사양

사용 용도:	IOPI® 연결 튜브는 IOPI® Pro(모델 3.1)과 함께 사용해야 합니다. IOPI® Pro(모델 3.1)는 의료서비스 전문가들이 연하곤란, 구음장애 및 폐쇄수면무호흡을 포함한 구강운동장애 환자의 혀와 입술의 근력과 지구력을 측정하고 평가하고 향상시키는 데 사용됩니다. IOPI® Pro는 의료서비스 전문가가 임상용으로 사용해야 합니다.
치수:	
길이	68cm
단부 직경	5mm
중간 직경	1.5mm
중량	2.3g
작동:	
온도	5°C~40°C(41°F~104°F)
습도	15%~93% 상대 습도
기압	70kPa~106kPa
보관/ 운송:	
온도	-25°C~65°C(-13°F~149°F)
습도	10%~93% 상대 습도
기압	70kPa~106kPa
제조업체:	
	IOPI® Medical LLC 18500 156th Ave NE, STE 104 Woodinville, WA U.S.A. 98072 전화: +1 (425) 549-0139
호주 후원업체:	
	EMERGO AUSTRALIA Level 20 Tower II Darling Park, 201 Sussex Street Sydney, NSW 2000 Australia
영국 책임자:	
	SEVERN HEALTHCARE TECHNOLOGIES LTD. 42 Kingfisher Court, Hambridge Rd. Newbury, Berkshire RG14 5SJ United Kingdom